

# RAPID TEST KIT RESULTADO EN MINUTOS

## Ehrlichia-Leishmania-Anaplasma-Heartworm Combo Test (EHR-LSH-ANA-CHW)



## Canine Parvo Virus Antigen Rapid Test (CPV Ag)



## Canine Distemper Virus Antigen Rapid Test (CDV Ag)



## CPV Ag+CCV Ag+Giardia Ag Combo Rapid Test (CPV-CCV-GIA)




## Feline FIV Ab - FELV Ag Combo Rapid Test



USO PREVISTO La prueba combinada Ehrlichia-Leishmania-Anaplasma-Heartworm es un ensayo inmunocromatográfico de flujo lateral para la detección cualitativa de anticuerpos contra Ehrlichia canis (EHR), anticuerpos contra Leishmania (LSH), anticuerpos contra Anaplasma spp (ANA) y antígenos del gusano del corazón (CHW) en suero de perro. muestra de plasma y sangre total.

Tiempo de ensayo: 5-10 minutos

Muestra: Suero, plasma o sangre total.

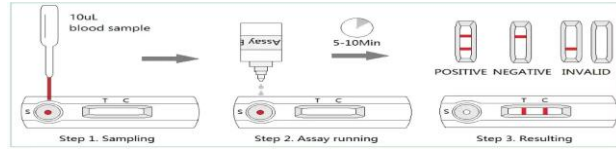

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA- Recoger las heces frescas o el vómito del perro con el bastoncillo de algodón del ano del perro o del suelo.-

Inserte el hisopo en el tubo de tampón de ensayo proporcionado.

Lo agita para conseguir una extracción eficiente de la muestra.-

Saque el dispositivo CPV Ag Test de la bolsa de aluminio y colóquelo horizontalmente.-

Aspire la muestra tratada del tubo del tampón de ensayo y coloque 3 gotas en el orificio de muestra "S" del dispositivo de prueba.-

Interpretar el resultado en 5-10 minutos. El resultado después de 10 minutos se considera no válido.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA- Recoja las secreciones oculares, nasales o anales del perro con el bastoncillo de algodón y humedézcalo lo suficiente.-

Inserte el hisopo en el tubo de tampón de ensayo proporcionado. Lo agita para conseguir una extracción eficiente de la muestra.-

Si es una muestra de suero o plasma, coloque 3 gotas de la muestra en el tubo del tampón de ensayo. Mézclalos bien para usarlos en el ensayo.-

Saque el dispositivo de prueba de la bolsa de aluminio y colóquelo horizontalmente.-

Aspire la muestra tratada del tubo del tampón de ensayo y coloque 3 gotas en el orificio de muestra "S" del dispositivo de prueba.-

Interpretar el resultado en 5-10 minutos.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA- Recoger las heces frescas o el vómito del perro con el bastoncillo de algodón del ano del perro o del suelo.-

Inserte el hisopo en el tubo de tampón de ensayo proporcionado. Lo agita para conseguir una extracción eficiente de la muestra.-

Saque el dispositivo de prueba de la bolsa de aluminio y colóquelo horizontalmente.-

Aspire la muestra tratada del tubo del tampón de ensayo y coloque 3 gotas en cada orificio de muestra "S" del dispositivo de prueba.-


Interpretar el resultado en 5-10 minutos.

Procedimiento de prueba- Deje que todos los materiales, incluida la muestra y el dispositivo de prueba, se recuperen a 15-25 °C antes de realizar el ensayo.-

Saque el dispositivo de prueba de la bolsa de aluminio y colóquelo horizontalmente.-

Utilice el gotero capilar para colocar 10 µl de la muestra preparada en el orificio de muestra "S" del dispositivo de prueba. Luego, deje caer 3 gotas (aproximadamente 90 µl) del tampón de ensayo en el orificio de la muestra inmediatamente.-

Interpretar el resultado en 5-10 minutos.

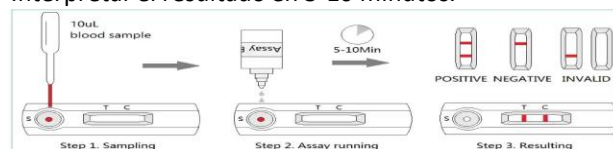



Companion Animal Rapid Test

| <b>TEST</b>  | <b>Costo C/10</b> | <b>Costo Indiv</b> |
|--------------|-------------------|--------------------|
| Parvo V      | \$1,400.00        | \$150.00           |
| Distemper    | \$1,400.00        | \$150.00           |
| Triple Gast. | \$2,700.00        | \$285.00           |
| Herl.        | \$1,750.00        | \$185.00           |
| 4Dx          | \$3,400.00        | \$365.00           |
| Combo Fel.   | \$2,200.00        | \$240.00           |